



PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

DEBITMETRU



Taian Dalu Medical Instrument Co., Ltd.

Nr. 3988 Strada Yitianmen, Zona Hi-tech,
Taian Shandong, China 271000
sales@charamedical.com -
www.dalumedical.com Fabricat în
China

REF DL-F03, DL-F04



Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10
1e Verd, 2595AA, Haga, Olanda

GIMA 33679 - 33680

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Importado por / Importado por Importiert von / Importerad av /
Import from:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italia
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Vă rugăm să citiți toate informațiile din acest manual înainte de a utiliza debitmetrul de vârf.



Precauție:

1. Debitmetrul de vârf este recomandat pentru utilizarea unui singur pacient.
2. Debitmetrul de vârf trebuie utilizat sub supravegherea unui profesionist din domeniul sănătății autorizat.
3. Dacă PEF este utilizat mai mult decât durata de viață specificată, precizia dispozitivului se poate deteriora.

Notă: Simptomele pacienților au prioritate față de citirile debitmetrului de vârf.

Setarea zonelor de acțiune

Marcajele de zonă pot fi setate cu un stylus de către profesionistul din domeniul sănătății pentru a oferi limite personale pentru implementarea planului de acțiune de asistență.

Pentru a utiliza debitmetrul de vârf

1. Glisați indicatorul în partea de jos a scalei.
2. Țineți dispozitivul orizontal în fața gurii.
3. Inspirați cât mai adânc posibil.
4. Sigilați-vă buzele ferm în jurul piesei bucale.
5. Suflă cât mai tare și cât mai repede posibil pentru o secundă sau mai mult.
6. Aveți grijă ca limba sau dinții să nu obstrucționeze fluxul de aer. O acțiune de "scuripat" sau tuse va da citiri false.
7. Luați notă de lectură.
8. Repetați pașii de la 1 la 7 de trei ori și înregistrați cea mai mare citire.
9. Luați măsuri în conformitate cu planul personal de gestionare a astmului.

Curățare

Curățați suprafețele exterioare după utilizare. Vă recomandăm să folosiți un șervețel obișnuit cu alcool (IPA 70%). Acordați o atenție deosebită zonei muștiucului.

Indicații de utilizare

Dispozitivul măsoară debitul expirator de vârf (PEF) pentru utilizare la adulți și copii și copii, cu vârsta de 5 ani și peste, în asistența medicală primară, clinici, spitale și la domiciliu, sub supravegherea unui profesionist din domeniul sănătății. PEF poate fi utilizat pentru a monitoriza progresul în tratamentul astmului, pentru a determina severitatea astmului, pentru a verifica răspunsul la tratament în timpul unui episod acut de astm, pentru a detecta agravarea funcției pulmonare și pentru a evita o posibilă criză severă de astm.

Utilizare în clinică

Când este utilizat pentru mai mulți subiecți, utilizați întotdeauna un muștiuc de unică folosință. Debitmetrul de vârf trebuie dezinfectat extern folosind un șervețel IPA (70%) între fiecare pacient și trebuie eliminat după 30 de pacienți sau 2 săptămâni, oricare dintre acestea survine mai devreme.

Contraindicații, avertismente, precauții și reacții adverse

- Acest dispozitiv este destinat să vă ajute să evaluați cât de bine este sub control astmul, prin măsurarea debitului maxim, care poate fi apoi monitorizat în timp.
- Nu încercați niciodată să demontați unitatea. Acest lucru poate cauza scoruri eronate ale fluxului expirator de vârf.
- Dacă credeți că dispozitivul nu citește corect, anunțați imediat medicul
- Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat Taian Dalu sau reprezentantului său autorizat și autorităților de reglementare din țară.

Magazin

Evitați zdrobirea unității. A se păstra într-un loc curat și uscat.

Dispoziția

Debitmetrul de vârf și accesoriile sale constituie deșeuri minim murdare din asistența medicală umană și trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Valabilitate

3 ani

Specificații tehnice

Produs: Debitmetru de vârf

Număr model: DL-F03, DL-

F04 Material: plastic ABS

Precizie: $\pm 10\text{L/min}$ sau $\pm 10\%$ din citire, oricare dintre acestea este mai mare

Repetabilitate: $\pm 10\text{L/min}$ sau $\pm 5\%$ din citire, oricare dintre acestea este mai mare.

Răspuns în frecvență: diferența profilului A/B mai mică de $\pm 15\text{L/min}$ sau $\pm 12\%$, oricare dintre acestea este mai mare

Cea mai mare rezistență la curgere: 205Pa/l/s @ 100 L/min

Interval de măsurare: DL-F03: 60 ~ 800L / min,
DL-F04: 50 ~ 400L / min
Interval de temperatură de funcționare: Limite: 17-37°C.

Limite de proiectare: 10-40°C

Standarde de performanță ale debitmetrului de vârf: EN ISO 23747:2015

Dimensiune / Greutate


Model DL-F03: L155mm * W48mm * H28mm /

55g Model DL-F04: L155mm * W48mm * H28mm

/ 55g

Conținutul pachetului

Debitmetru de vârf, instrucțiuni de utilizare

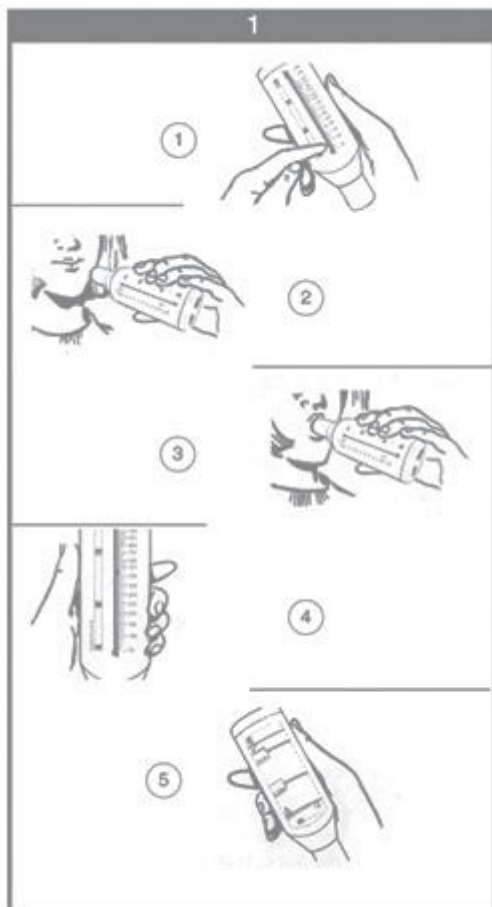

Semnificația simbolurilor

REF	Codul produsului		A se păstra departe de lumina soarelui		Consultați instrucțiunile de utilizare
LOT	Numărul lotului		A se păstra într-un loc răcoros și uscat		Data fabricației
	Producător	CE	Dispozitivul medical respectă Directiva 93/42/CEE	EC REP	Reprezentant autorizat în comunitatea europeană
			Atenție: citiți cu atenție instrucțiunile (avertismentele)		

TERMENI DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard B2B Gima de 12 luni.