

Utilizarea regulată a unui debitmetru Peak vă poate ajuta să vă monitorizați astmul prin detectarea îngustării căilor respiratorii chiar înainte de a simți orice simptome, oferindu-vă timp să vă ajustați medicația înainte ca simptomele să se agraveze.

Pacient singur, potrivit pentru adulți (33679) și copii (33680) de la 5 ani.

- măsurați modificările zilnice ale respirației
- controlul astmului dumneavoastră în timp
- arată cât de bine funcționează tratamentul tău
- recunoașteți semnele unei erupții înainte de apariția simptomelor
- știi ce pași să faci când ai semne de astm
- decideți când să vă sunați medicul sau să primiți îngrijiri de urgență.

Vă rugăm să citiți toate informațiile din acest manual înainte de a utiliza debitmetrul de vârf.

Precauție:

1. Debitmetrul de vârf este recomandat pentru utilizarea unui singur pacient.
2. Debitmetrul de vârf trebuie utilizat sub supravegherea unui cadru medical autorizat.
3. Dacă PEF este utilizat pentru o durată mai lungă de viață decât cea specificată, precizia dispozitivului se poate deteriora.

Notă: Simptomele pacienților au prioritate față de citirile debitmetrului.

Setarea zonelor de acțiune:

Marcatoarele de zonă pot fi setate de către profesionistul din domeniul sănătății pentru a oferi limite personale pentru implementarea planului de acțiune pentru astm.

Pentru a utiliza debitmetrul:

1. Glisați indicatorul în partea de jos a scalei.
2. Țineți dispozitivul orizontal în fața gurii.
3. Inspiră cât mai adânc posibil.
4. Sigilați-vă ferm buzele în jurul piesei bucale.
5. Suflați cât mai tare și cât mai RAPID posibil pentru o secundă sau mai mult.
6. Aveți grijă ca limba sau dinții să nu obstrucționeze fluxul de aer. O acțiune de „scuipat” sau tuse va da citiri false.
7. Notati valoarea.
8. Repetați pașii de la 1 la 7 de trei ori și înregistrați cea mai mare valoare.
9. Luați măsuri conform planului personal de gestionare a astmului.


Curățare:

Curățați suprafețele exterioare după utilizare. Vă recomandăm să folosiți un șervețel obișnuit cu alcool (IPA 70%). Acordați o atenție deosebită spre zona piesei bucale.

Indicații de utilizare:

Dispozitivul măsoară fluxul expirator de vârf (PEF) pentru utilizare la adulți și copii, cu vârsta de 5 ani și peste, în îngrijirea primară, clinici, spitale și la domiciliu, sub supravegherea unui profesionist din domeniul sănătății. PEF poate fi folosit pentru a monitoriza progresul în tratamentul astmului, determinați severitatea astmului, verificați răspunsul la tratament în timpul unui astm acut, detectați agravarea funcției pulmonare și evitați o posibilă apariție severă a astmului.

Utilizare în clinică

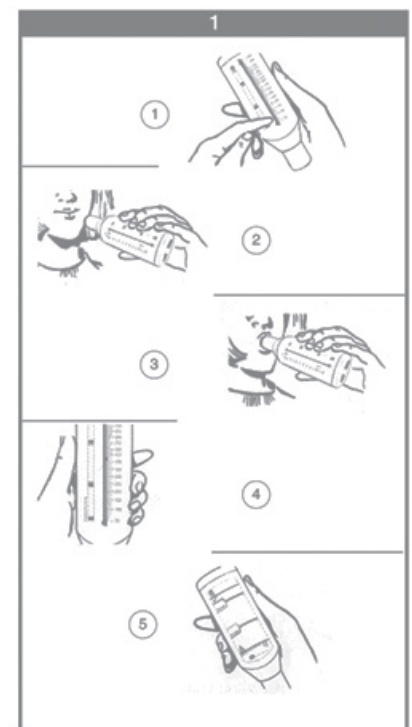

Când este utilizat pentru mai mulți subiecți, utilizați întotdeauna un muștiuc de unică folosință. Debitmetrul trebuie să fie extern dezinfectat folosind un șervețel IPA (70%) între fiecare pacient și trebuie eliminat după 30 de pacienți sau 2 săptămâni, oricare este mai devreme.

Contraindicații, avertismente, precauții și reacții adverse:

- Acest dispozitiv este destinat să vă ajute să evaluați și să țineți sub control astmul bronșic, prin măsurarea debitului de vârf.
- Nu încercați niciodată să demontați unitatea. Acest lucru poate cauza scoruri de debit maxim expirator defecte.
- Dacă credeți că dispozitivul nu citește corect, informați imediat medicul dumneavoastră
- Depozitați într-un loc curat și uscat.

Reciclare:

Debitmetrul de vârf și accesoriile sale constituie deșeuri murdare de la îngrijirea sănătății umane și ar trebui să fie reciclate în conformitate cu cerințele locale.

Termen de valabilitate 3 ani

Specificatii tehnice:

Produs: Debitmetru de vârf

Număr de model: DL-F03, DL-F04

Material: plastic ABS

Precizie: $\pm 10\text{L/min}$ sau $\pm 10\%$ din citire, oricare dintre acestea este mai mare

Repetabilitate: $\pm 10\text{ L/min}$ sau $\pm 5\%$ din citire, oricare dintre acestea este mai mare.

Răspuns în frecvență: diferența de profil A/B mai mică de $\pm 15\text{ l/min}$ sau $\pm 12\%$, oricare dintre acestea este mai mare

Cea mai mare rezistență la curgere: $205\text{ Pa/l/s @ }100\text{ L/min}$

Interval de măsurare: DL-F03: $60\sim 800\text{L/min}$,

DL-F04: $50\sim 400\text{L/min}$

Interval de temperatură de funcționare: Limite: $17\text{-}37^{\circ}\text{C}$.

Limite de proiectare: $10\text{-}40^{\circ}\text{C}$

Standarde de performanță a debitmetrului de vârf: EN ISO 23747:2015

Dimensiune/Greutate

Model DL-F03: $1155\text{mm}*\text{W}48\text{mm}*\text{H}28\text{mm}/55\text{g}$

Model DL-F04: $1155\text{mm}*\text{W}48\text{mm}*\text{H}28\text{mm}/55\text{g}$

Conținutul pachetului: Debitmetru de vârf, instrucțiuni de utilizare