

Manual de utilizare pentru scaun hidraulic multifunctional

Model: KY702S-A



1. O prezentare generală a manualului de utilizare

Toate figurile din acest manual sunt doar pentru referință pentru utilizatori. Vă rugăm să consultați obiectul real atunci când utilizați.

2. Domeniul de aplicare

Acest produs este destinat persoanelor cu dizabilități, bolnavelor, vârstnicilor sau persoanelor slabe cu dificultăți de mișcare. Acest produs poate fi utilizat doar de persoane pentru deplasarea în încăperi sau pentru ameliorarea intestinelor.

3. Precauții pentru utilizare în siguranță

- Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție Manualul de utilizare pentru scaunul mobil multifuncțional, denumit în continuare Manual de utilizare, pentru a putea utiliza scaunul corect.
- Dacă nu respectați instrucțiunile, produsul se poate deteriora, ceea ce poate duce la vătămări corporale sau la pericol de moarte.
- Vă rugăm să nu permiteți copiilor sau persoanelor care nu înțeleg procedurile prezentate în acest manual să utilizeze scaunul mobil.
- Toate măsurile de siguranță sunt importante pentru siguranță. Vă rugăm să le respectați.
- După ce ați citit cu atenție acest manual și ați putut înțelege procesele de operare prezentate în el, vă rugăm să îl păstrați într-un loc accesibil oricând, pentru o citire ușoară.



Avertismente


1. Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să verificați dacă toate componentele sunt instalate la locul lor și dacă sunt fixate corect pentru a asigura siguranța utilizării.
2. Vă rugăm să reglați înălțimea la înălțimea corespunzătoare înainte de utilizare și să vă asigurați că cadrul scaunului din stânga și din dreapta este menținut la aceeași înălțime.
3. Când utilizatorul se așează sau părăsește scaunul mobil, vă rugăm să călcați pe podea și să nu stați în picioare pe pedală, altfel este ușor să răsturnați scaunul mobil și să provocați victime inutile.
4. Când utilizați scaunul mobil, asigurați-vă că încuietoarea de siguranță și centura de siguranță sunt în stare blocată.

5. Când utilizatorul se așează sau coboară de pe scaunul mobil, asigurați-vă că roțile sunt blocate.
6. Când utilizatorul stă în scaunul mobil și dorește să ridice obiecte dincolo de scaunul mobil, acordați atenție înclinării corpului pentru a nu se înclina prea mult și mențineți centrul de greutate al corpului în raza celor patru roți cât mai mult posibil, astfel încât să evitați răsturnarea scaunului mobil din cauza pierderii centrului de greutate al acestuia.
7. Când stați în scaunul mobil, nu vă aplecați prea mult pentru a depăși centrul de greutate al utilizatorului cu cele 4 roți pentru a ridica obiecte de pe sol, deoarece nu veți putea provoca accidente inutile.
8. La reglarea înălțimii scaunului, roțile trebuie blocate; mânerul de pe ambele părți trebuie agitate sincron și uniform.
9. Nu urcați treptele în grabă din inerție, altfel puteți provoca accidente utilizatorului și deteriorarea scaunului mobil. La urcarea și coborârea scărilor, operatorul nu trebuie să miște pacientul sau persoana cu dizabilități împreună cu scaunul mobil, altfel puteți crea pericole inutile pentru utilizator.
10. Scaunul mobil este potrivit pentru deplasarea pe teren plat; evitați gropile și obstacolele, pentru a preveni pericolul de răsturnare și de accidentare.
11. Când panta de coborâre depășește 5 grade, operatorul trebuie să fie orientat spre spătarul scaunului mobil înainte și să coboare panta înapoi, confirmând cu atenție că este sigur. Dacă scaunul mobil este orientat înainte în timpul coborârii pantei, utilizatorul se poate apleca înainte și cădea. Dacă nu sunteți sigur că puteți controla scaunul mobil la coborâre, vă rugăm să cereți ajutorul altor persoane.
12. Nu staționați pe teren în pantă. Când staționați pe teren în pantă, toate cele patru roți trebuie blocate, iar timpul de staționare nu trebuie să fie prea lung. În același timp, cineva trebuie să controleze scaunul în mișcare pentru a asigura siguranța personalului.
13. Frâna celor patru roți ale scaunului mobil este utilizată doar pentru frânare la parcare și nu trebuie utilizată pentru decelerare și frânare atunci când scaunul este în mișcare.

IV. Parametrii și componentele specificațiilor produsului

Parametri Model	 KY702S-A
Lungime	700 mm
Lățime	595 mm
Înălțime	805-1005 mm
Dimensiunea roții din față	4 inci
Dimensiunea roții din spate	3 inci
Lățimea scaunului	460 mm
Adâncimea scaunului	350 mm
Înălțimea scaunului deasupra solului	440-640 mm
Înălțimea cadrului roților față de sol	130 mm
Greutate netă	25,5 kg
Sarcină maximă portantă	120 kg

Acest produs este compus din bază, cadru scaun stânga, cadru scaun dreapta, plostă, roată față de 4 inch, roată spate de 3 inch, tub roții spate, tub de rolă, pedală de picior, presă hidrolică, suport plostă, pernă scaun etc. Materialul este sudat cu țeavă de oțel de înaltă rezistență.

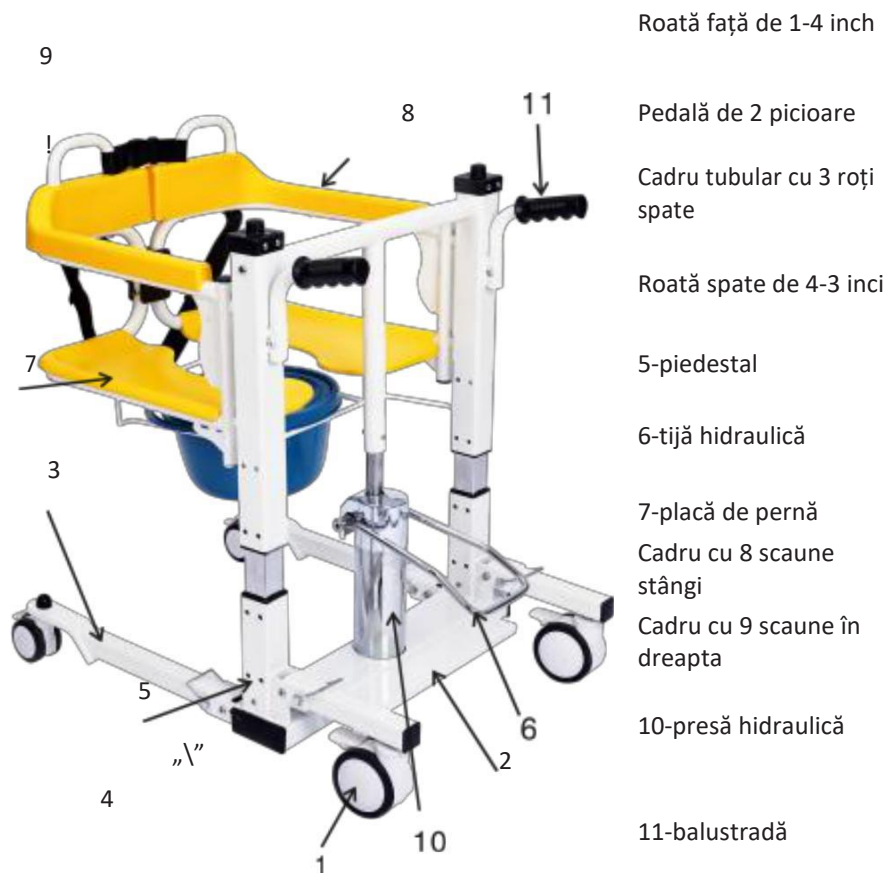

* Figurile din acest manual sunt doar pentru referință. Vă rugăm să consultați obiectul real atunci când îl utilizați.

V. Caracteristici de performanță

- Este folosit pentru a facilita deplasarea persoanelor cu dificultăți de mobilitate între canapele, paturi, scaune și toalete.
- Designul larg de deschidere și închidere din spatele scaunului mobil permite operatorului să aibă grijă de persoanele cu dificultăți de mișcare, prevenind oboseala, suprasolicitarea și chiar deteriorarea taliei.
- Sarcina maximă este de 120 kg.

Poate fi folosit pentru a pedala ușoară cu tijă hidraulică pentru ridicarea înălțimii scaunului, potrivit pentru diferite înălțimi de mobilier.

- Roata medicală silențioasă și frâna cu butuc sunt sigure, stabile și fiabile.
- Designul dublu de siguranță, format din încuietoarea de siguranță și centura de siguranță, asigură utilizarea în siguranță pentru persoanele cu dificultăți de mișcare.

Perna de șezut din burete special îngroșat este confortabilă pentru o perioadă lungă de timp și nu provoacă ușor oboseală; husa pernei poate fi îndepărtată și spălată.

- Designul rapid detașabil al țevii de conectare a roții spate a coloanei facilitează deplasarea scaunului mobil și extinde raza de acțiune.

VI. Limite de conducere

Scaunul mobil este destinat exclusiv utilizării în interior, iar viteza sa de deplasare trebuie să fie ≤ 3 km/h.

VII. Instrucțiuni de instalare

1. Atât suporturile pentru țevile roților din față, cât și cele din spate sunt fixate cu știfturi. În primul rând,

Scoateți știfturile, nivelați suportul pentru țevi și apoi introduceți știfturile în orificiile circulare de pe suportul pentru țevi pentru a le acoperi. Metoda este aceeași și pe cealaltă parte. Operațiunile conexe sunt prezentate în Figura A.



Figura A

2. așa cum se arată în figura B.



Figura B

3. Mai întâi, deșurubați șuruburile de pe cilindrul mic care fixează cadrul scaunului și introduceți cadrele scaunului stânga și dreapta în coloanele circulare mici de susținere corespunzătoare de pe laturile stânga și dreapta. După introducere, rotiți-le înainte și înapoi cu forță în timp ce le mișcați. Apăsați în jos până la poziția inferioară. nu poate fi apăsat în jos, așa cum se arată în Figura C.



Figura C

4. Folosiți o unealtă pentru a strânge cele două șuruburi și a fixa cilindrul cadrelor scaunului stânga și dreapta pentru a preveni deteriorarea scaunului. Cadrul este detașat de cadrul principal, iar cealaltă parte este, de asemenea, fixă, așa cum se arată în Figura D.


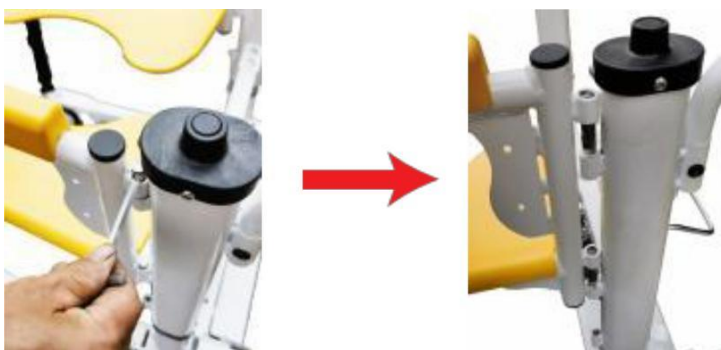


Figura D

5. Dacă trebuie să folosiți plosca, introduceți ambele capete ale suportului ploștei în tubul de instalare a acestuia și apoi introduceți plosca în suportul ploștei din spate, așa cum se arată în Figura E.

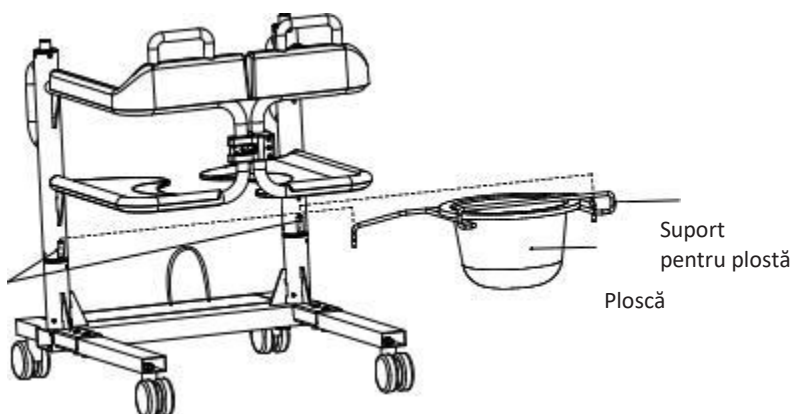

Suport pentru ploscă
țeavă de montare

Figura E

VIII. Instrucțiuni de utilizare

* Luați ca exemplu mutarea utilizatorului de către operator de pe scaun pe pat pentru a ilustra pașii. Metoda de operare este aceeași pentru alte piese de mobilier și dotări.

1. Lăsați utilizatorul să stea în poziție verticală și reglați înălțimea cadrului scaunului mobil astfel încât suprafața inferioară a cadrului scaunului să fie puțin mai înaltă decât planul scaunului.

2. Deschideți cadrul scaunului pe ambele părți și mutați-l în față utilizatorul și ajustați poziția scaunului

mobil astfel încât centrul de greutate al

utilizatorului să fie la înălțimea scaunului

cadru; și faceți ca partea inferioară a scaunului să

atingă ușor planul scaunului.



3. Blocați cele două frâne ale roților din față de 4 inch, ridicați picioarele utilizatorului și așezați-le pe pedală.

Permiteți utilizatorului să își încline ușor corpul pe rând la stânga și la dreapta, iar în același timp, operatorul rotește cadrul scaunului pe partea corespunzătoare pentru a permite utilizatorului să stea pe rând pe cadrele scaunului din stânga și din dreapta ale scaunului în mișcare;

5. După ce utilizatorul s-a așezat complet pe cadrul scaunului din stânga și din dreapta, închideți complet cadrul scaunului din stânga și din dreapta, blocați manual încuietoarea de siguranță și prindeți centura de siguranță; (operatorul trebuie să reconfirme că încuietoarea de siguranță este la locul ei).

★ Dacă este selectată tija de perfuzie opțională, rotiți butonul pentru a regla înălțimea tijei de perfuzie. După ce tija de perfuzie este instalată pe scaunul de schimbător, aceasta trebuie îndepărtată dacă este necesară ajustarea înălțimii scaunului.

★ Dacă trebuie să folosiți centura de siguranță, vă rugăm să ajustați lungimea la poziția corectă înainte de a o utiliza.

6. Utilizatorul se adaptează într-o poziție confortabilă de ședere și se ține de balustradele de pe ambele părți.

7. Operatorul verifică distanța dintre baza cadrului scaunului mobil și scaun, ridică cadrul scaunului cu 3-5 cm, apoi scoate frâna roții din față de 4 inch și îndepărtează încet scaunul mobil de scaun.



8. Operatorul împinge scaunul mobil din față spre marginea patului.



9. Verificați înălțimea cadrului scaunului mobil la marginea patului pentru a vă asigura că partea de jos a cadrului scaunului este puțin mai sus decât suprafața patului (dacă înălțimea cadrului scaunului trebuie ajustată, acesta poate fi acționat numai după ce cele două roți față de 4 inch sunt blocate);

10. Operatorul împinge scaunul de schimbător complet în poziția predeterminată a patului, blochează cele două roți din față de 10 cm, frâna de la roata din față, cu piciorul pe tija hidrolică, la limitatorul inferior, în același timp coboară cele două balustrade.



11. Deschideți pe rând centura de siguranță și încuietoarea de siguranță de pe spătarul scaunului mobil și deschideți încet cadrul scaunului din stânga și din dreapta, astfel încât fesele utilizatorului să stea pe pat.

12. Operatorul deblochează cele două roți față de 4 inch, mută scaunul mobil departe de pat, ridică picioarele utilizatorului pe pat și îl lasă pe acesta să se întindă.



IX.. Listă de ambalare

După deschiderea cutiei, vă rugăm să confirmați următoarele piese și accesorii:

NU	Articole	Specificații	Cantitate
1	Baza	Set	1
2	Cadrul scaunului stâng	Set	1
3	Cadrul scaunului drept	Set	1
4	Spătar stânga din plastic	Set	1
5	Spătar dreapta din plastic	Set	1
6	Ploscă	Set	1
7	Suport pentru ploscă	Bucată	1
8	Pernă de șezut	Foaie	1
9	Rolă	Bucată	4
10	Set de scule	Set	1
11	Accesorii pentru șuruburi	Set	1
12	Instrucțiuni de operare	Bucată	1
13	Certificarea produsului	Foaie	1