




Kaiyang Medical

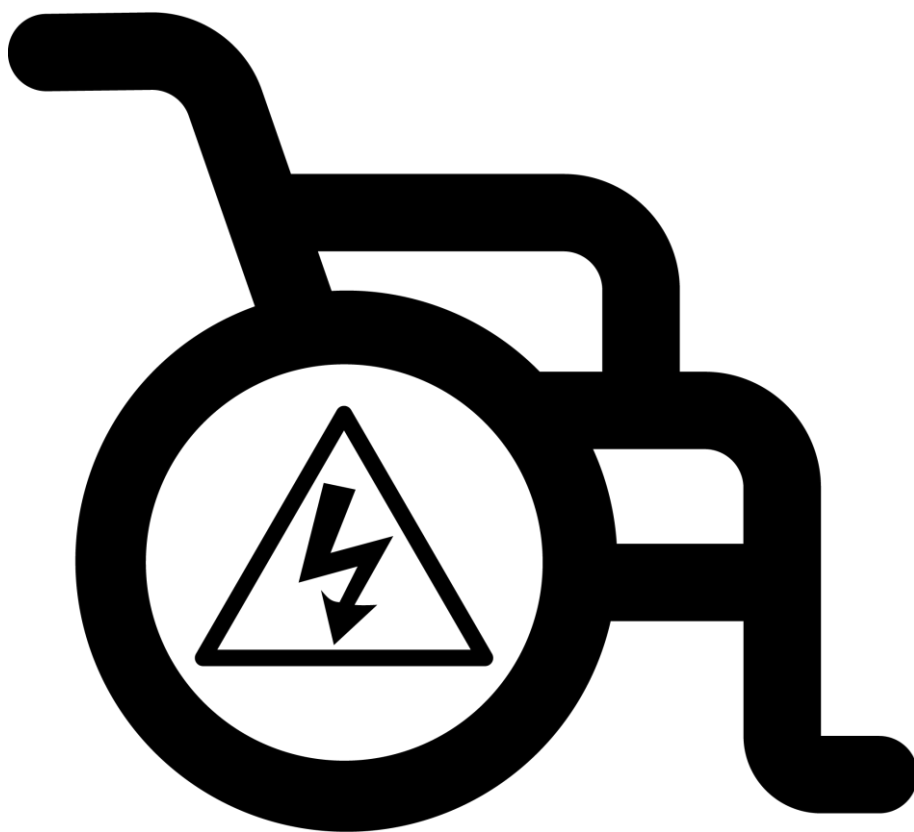

Scaun rulant electric

Manual de utilizare

I. Introducere

Acest scaun rulant electric universal este conceput pentru a oferi o soluție confortabilă și convenabilă de mobilitate personală pentru persoanele cu mobilitate redusă. Este potrivit pentru diverse medii interioare și exterioare, ajutând utilizatorii să se deplaseze liber și să își îmbunătățească independența și confortul în viața de zi cu zi.

II. Componente principale

Șezut și spătar

- Concepute ergonomic pentru confort și susținere.
- Material respirabil.
- Spătar reglabil pentru diferite preferințe de ședere.

Cotiere

- Ușor de utilizat pentru sprijin la urcare și coborâre.
- Unele modele permit reglarea înălțimii sau detașarea lor pentru flexibilitate sporită.

Suporturi pentru picioare

- Reglabile pe înălțime pentru confort și susținere optimă.

Dispozitiv de control

- De obicei, situat pe cotieră sau în partea frontală.
- Include joystick sau butoane pentru deplasare înainte, înapoi, viraje și reglarea vitezei.
- Operare simplă și intuitivă.

Baterie și încărcător

- Baterie performantă pentru alimentarea scaunului rulant.
- Autonomia variază în funcție de capacitate și mediu de utilizare.
- Încărcătorul trebuie utilizat conform instrucțiunilor pentru a menține durata de viață a bateriei.

Cadru și roți

- Cadru robust cu capacitate mare de încărcare și stabilitate.
- Roți spate de diametru mare, combinate cu roți față flexibile.
- Frâne pe roțile din spate pentru siguranță.
- Design antiderapant pentru stabilitate pe diverse tipuri de teren.

III. Pregătiri înainte de utilizare

- Verificați dacă există deteriorări sau componente slăbite.
- Asigurați-vă că bateria este suficient încărcată.

- Ajustați înălțimea șezutului, unghiul spătarului și poziția suporturilor pentru picioare.
- Asigurați-vă că zona de utilizare este sigură și fără obstacole.

IV. Metode de operare

Pornire și oprire

- Apăsăți butonul de pornire; indicatorul luminos se va aprinde.
- Pentru oprire, apăsați din nou butonul pentru a economisi energie și a asigura siguranța.

Deplasare înainte și înapoi

- Mutați joystick-ul înainte pentru deplasare înainte, înapoi pentru deplasare înapoi.
- Controlați viteza prin amplitudinea mișcării joystick-ului.
- Ajustați ușor joystick-ul pentru modificarea direcției și vitezei.

Viraje

- Mutați joystick-ul la stânga sau dreapta pentru a vira în direcția dorită.
- Evitați virajele bruște pentru a preveni răsturnarea.

Frânare

- Eliberați joystick-ul pentru încetinire și oprire automată.
- Folosiți frâna manuală pentru oprire de lungă durată.

Depășirea obstacolelor

- Pentru obstacole mici, mențineți o viteză adecvată și permiteți roților din față să le traverseze primele.
- Evitați obstacolele mari pentru a preveni deteriorarea scaunului rulant sau rănirea utilizatorului.

V. Precauții

- **Nu suprasolicitați scaunul rulant.** Suprasarcina poate afecta performanța și siguranța.
- **Evitați condițiile meteorologice extreme.** Ploaia, zăpada sau vântul puternic pot afecta stabilitatea și funcționarea scaunului.
- **Verificați periodic starea scaunului rulant.** Controlați nivelul bateriei, presiunea în anvelope și sensibilitatea dispozitivului de control.
- **Respectați regulile de circulație.** Utilizați scaunul rulant pe trotuare sau în zonele permise.
- **Nu demontați sau modificați scaunul fără autorizare.** Contactați un specialist pentru reparații sau ajustări.

VI. Întreținere

Curățare

- Ștergeți periodic suprafața scaunului cu o cârpă moale și umedă.

- Evitați substanțele chimice corozive.

Întreținerea anvelopelor

- Verificați presiunea periodic și reumflați dacă este necesar.
- Îndepărtați murdăria și pietricelele pentru a menține aderența.

Întreținerea bateriei

- Respectați metoda corectă de încărcare.
- Evitați descărcarea completă a bateriei.
- Dacă scaunul rulant nu este utilizat o perioadă lungă, încărcați bateria periodic.

Lubrifierea pieselor mobile

- Aplicați periodic ulei lubrifiant pe axele roților, balamale și articulațiile joystick-ului.

Depozitare

- Alegeți un loc uscat și bine ventilat.
- Protejați scaunul rulant de praf și umiditate.

Prin utilizarea și întreținerea corespunzătoare a acestui scaun rulant electric, durata de viață a produsului poate fi prelungită, oferind utilizatorului siguranță și mobilitate de lungă durată. Dacă întâmpinați probleme sau aveți nevoie de asistență tehnică, contactați echipa de service autorizată.