

OMRON®

TERMOMETRU DIGITAL

Modelul MC-343F

9Nr. 481321-7D

Vă mulțumim că ați achiziționat termometrul digital OMRON.

Termometrul pe care l-ați achiziționat oferă o citire sigură, precizie și rapidă a temperaturii. Vă puteți măsura temperatura prin voce orală, rectală sau Underarm. Acest termometru elimină orice îngrijorare cu privire la sticlă spartă sau pericolele de mercur. Rețineți că temperatura dumneavoastră este afectată de fumat, mâncare sau băutură. Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza termometrul digital OMRON MC-343F. Vă recomandăm să exercitați luarea temperaturii cu termometrul în acest fel pentru a câștiga încredere în tehnica dumneavoastră atunci când utilizați termometrul. Contactați medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări cu privire la temperaturi specifice.

NOTE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Pentru asigurarea utilizării corecte a siguranței de bază a produsului, tehnicele respectate înlocuind sau măsurând, inclusiv măsurile de precauție enumerate mai jos.

AVERTISMENT

Febra mare sau prelungită necesită îngrijire medicală, în special pentru copiii mici. Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră. Citiți cu atenție și urmați instrucțiunile atașate pentru a asigura citiri precise ale temperaturii. Rețineți că citirile de temperatură sunt afectate de multe factori precum efortul fizic, consumul de băuturi calde sau reci înainte de măsurare, precum și tehnica de măsurare.

Vă rugăm să rămâneți nemiscat în timpul măsurării.

Utilizarea citirilor de temperatură pentru autodiagnosticare este periculoasă. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră pentru interpretarea rezultatelor.

Autodiagnosticarea poate duce la agravarea afecțiunilor bolii existente.

Acest termometru este utilizat pentru măsurarea temperaturii prin orală, rectală sau subraț. Nu încercați să luați temperatura în alte locuri, cum ar fi în ureche, deoarece poate duce la citiri false și poate duce la răni.

Păstrați termometrul la îndemâna copiilor. Nu permiteți copiilor să-și ia temperatura nesupravegheați. Copiii se pot răni atunci când încercarea de a lua temperatura fără supraveghere.

Nu lăsați bateria, capacul bateriei sau capacul sondei acoperite pe o suprafață caldă sau rece care poate să se încălzească sau să se răcească.

Nu încercați să înlocuiți bateria sau capacul sondei, contactați imediat un medic.

Nu încercați măsurători când termometrul este umed, deoarece pot rezulta citiri incorecte.

PRUDENȚĂ

Nu mișcați de termometru. Acest lucru poate duce la ruperea și/sau rănirea.

Nu împărțiți termometrul între persoane.

Nu încercați să dezambilați sau să reparați termometrul. Acest lucru poate duce la citiri incorecte.

Nu încercați să incinerati bateria. S-ar putea să explodeze.

Accidenți de atenție polarității (+ →) atunci când înlocuiți bateria. Nerespectarea acestui lucru poate duce la scurgeri de fluid, generare de căldură sau explozie, rezultând daune.

la unitate.

Scoteți bateria când termometrul nu va fi utilizat timp de 3 luni sau mai mult. Nerespectarea acestui lucru poate duce la scurgeri de fluid, generare de căldură sau explozie, ducând la deteriorarea unității.

Nu utilizați telefonul mobil în apropierea termometrului.

Nu utilizați termometrul în locuri în care sunt prezente electricitate statică puternică sau câmpuri electromagnetice. Acest lucru poate duce la citiri incorecte și poate contribui la defectarea instrumentului.

Nu forțați termometrul în rect. Opriți inserția și întrerupeți măsurarea atunci când este prezentă durerea. Nerespectarea acestui lucru poate duce la răni.

Nu încercați măsurători rectale la persoane cu tulburări rectale. Acest lucru poate agrava sau agrava tulburarea.

Nu clătiți pe unitate sau pe carcasa rigidă.

Nu încercați să dezinfecțiți secțiunea de detectare a termometrului scufundându-l în alcool sau în apă fierbinte (apă peste 50°C).

Neutralizarea unui capac de sondă poate duce la bacterii și infecții virale.

MĂSURI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Nu utilizați termometrul pentru a măsura altceva decât temperatura corpului uman.

Nu scapați termometrul și carcasa de protecție și nu le expuneți la șocuri sau vibrații.


Nu depozitați termometrul în carcasa de protecție când este damp. Ștergeți-l mai întâi cu o cârpă uscată.

Evitați să luați temperatura până când după 30 de minute au trecut după exerciții fizice, baie sau mâncare/băutură.

COMUTAREA ÎNTRE FAHRENHEIT/GRADE CENTIGRADE

Apăsând (CELULUS) de 7 secunde până când se emite un bip.

Apăsând se va schimba la ceaălaltă scară de măsurare la momentul în care se aude bipul.

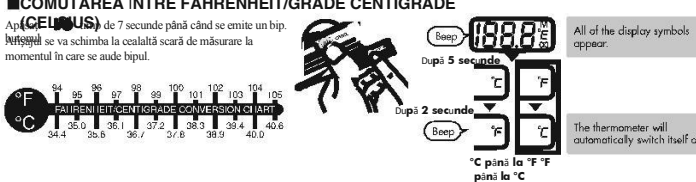


UTILIZARE RECTALĂ:

Utilizați întotdeauna un capac de sondă atunci când luați măsurători rectale.

- Utilizați în mod obișnuit pentru copiii mici atunci când este dificil să ia temperatura orală sau la subraț.
- Lubrificați cu un gel solubil în apă. Nu folosiți vaselină.
- Introduceți ușor vârful sondei nu mai mult de 1,3 cm în rect. Nu forțați vârful în rect dacă întâmpinați rezistență.
- Dezinfectați termometrul după utilizare.

UTILIZARE AXILARĂ (AXILARĂ):

- Așezați vârful sondei în centrul axilei.

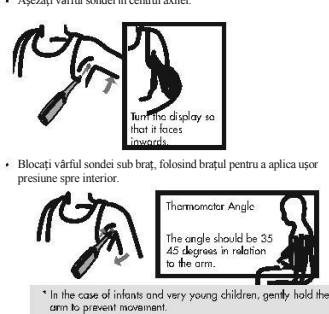


ÎNLOCUIREA BATERIEI

Baterie: Baterie buton alcalin-mangan LR41 (disponibilă în comerț)


Indicator de înlocuire a bateriei (X)

Înlocuiește bateria când indicatorul de înlocuire a bateriei apare când termometrul este pornit.


1. Folosiți o monedă pentru a scoate capacul bateriei.

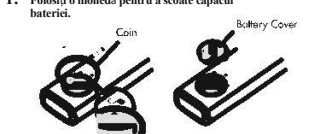


2. Scoateți bateria.

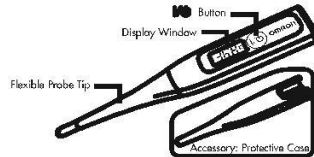

3. Introduceți noua baterie cu polul "+" ca fața în sus, așa cum se arată în diagramă.

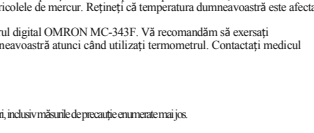

4. Folosiți o monedă pentru a înlocui capacul bateriei.

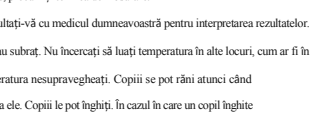

NOTE:

Termometrul este echipat cu o baterie în scopuri de testare.

Este posibil ca această baterie să nu ofere accesul durată de viață a bateriei ca un

baterie nouă.

Consultați autoritățile locale și urmați instrucțiunile acestora pentru

eliminarea bateriilor și/sau a termometrului.

Nu sărbiți înclui O din jurul bateriei

acoper. Rezistență în apă va esua și poate duce

la interpretarea greșită și eșecul unității.

LUAREA TEMPERATURII

Dacă este posibil, trebuie utilizat un capac de sondă care acoperă toate secțiunile. Înlocuiește capacul sondei cu unul nou după fiecare utilizare.

Capacele sondei sunt incluse cu termometrul, așezați un capac de sondă cu grija

1. Apăsati butonul

Este afișată o temperatură implicită de 37,0 °C (98,6 °F) pe afișaj.

NOTĂ:

Când o temperatură diferită de 37,0°C (98,6°F) este afișată, vă rugăm să consultați

"DEPANARE" pentru detalii pentru corectarea

problemei.

2. Aplicați termometrul pe locul de măsurare.

Utilizați locul oral, rectal sau axilar pentru măsurare.

NOTĂ:

Chiar dacă indicatorul "L" nu se afișează (atunci când numai

temperatura este afișată), accesați nu este o eroare. Deci

temperatura poate fi luată ca atare.

3. Pentru măsurarea orală și rectală:

Când citirea este gata, termometrul va emite un

[bip-bip-bip] de trei ori. Scoateți termometrul

de la locul de măsurare și citiți rezultatul.

Pentru subraț, vă rugăm să continuați să țineți timp de 2 - 5 minute

pentru a finalizați măsurarea.

SINCRONIZAREA NOTIFICĂRII SONERIEI

Oral: aproximativ 20 de sec Rectal: aprox. 10 secunde Subraț: aproximativ 25 de secunde

* 25 de secunde este cea mai timpurie indicație de temperatură estimată. Pentru a finaliza măsurarea, este necesară măsurarea temperaturii la subraț între 2 - 5 minute (în funcție de temperatură și starea ambiantă).

NOTE:

Măsurarea continuă chiar și după notificarea soneriei.

Sincronizarea notificării soneriei se bazează pe o temperatură ambiantă de 23 de grade fără capacul sondei

• Vor exista diferențe individuale în rezultatele măsurătorilor.

4. Opriți termometrul și depozitați-l în carcasa de protecție.

NOTE:

Citirea va fi stocată automat în memorie.

Deși termometrul se va opri automat la 30 de minute după utilizare sau după 3 minute când nu a fost utilizat, ar trebui să fie

oprit manual pentru a economisi bateria.

AFIȘAREA ULTIMEI TEMPERATURII

Apăsând butonul pentru a afișa temperatura care a fost măsurată cel mai recent.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea "MĂSURAREA TEMPERATURII".

MĂSURARE CORECTĂ

Precizia măsurătorii nu poate fi asigurată atunci când metoda utilizată pentru măsurarea temperaturii este

incorctă.

UTILIZARE ORALĂ (pentru vârsta de 4 ani și peste):

Gura trebuie să rămână închisă până la 5 minute înainte de a încerca o citire.

Așezați termometrul în gură sub limbă, astfel încât să se sprijine la stânga sau la dreapta rădăcinii

limbă.

Folosiți presiunea limbii în jos pentru a ține termometrul în poziție.

Țineți termometrul pentru a împiedica alunearea în gură.

AFIȘAREA ULTIMEI TEMPERATURII

Apăsând butonul pentru a afișa temperatura care a fost măsurată cel mai recent.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea "MĂSURAREA TEMPERATURII".

MĂSURARE CORECTĂ

Precizia măsurătorii nu poate fi asigurată atunci când metoda utilizată pentru măsurarea temperaturii este

incorctă.

UTILIZARE ORALĂ (pentru vârsta de 4 ani și peste):

Gura trebuie să rămână închisă până la 5 minute înainte de a încerca o citire.

Așezați termometrul în gură sub limbă, astfel încât să se sprijine la stânga sau la dreapta rădăcinii

limbă.

Folosiți presiunea limbii în jos pentru a ține termometrul în poziție.

Țineți termometrul pentru a împiedica alunearea în gură.

AFIȘAREA ULTIMEI TEMPERATURII

Apăsând butonul pentru a afișa temperatura care a fost măsurată cel mai recent.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea "MĂSURAREA TEMPERATURII".

MĂSURARE CORECTĂ

Precizia măsurătorii nu poate fi asigurată atunci când metoda utilizată pentru măsurarea temperaturii este

incorctă.

UTILIZARE ORALĂ (pentru vârsta de 4 ani și peste):

Gura trebuie să rămână închisă până la 5 minute înainte de a încerca o citire.

Așezați termometrul în gură sub limbă, astfel încât să se sprijine la stânga sau la dreapta rădăcinii

limbă.

Folosiți presiunea limbii în jos pentru a ține termometrul în poziție.

Țineți termometrul pentru a împiedica alunearea în gură.

AFIȘAREA ULTIMEI TEMPERATURII

Apăsând butonul pentru a afișa temperatura care a fost măsurată cel mai recent.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea "MĂSURAREA TEMPERATURII".

MĂSURARE CORECTĂ

Precizia măsurătorii nu poate fi asigurată atunci când metoda utilizată pentru măsurarea temperaturii este

incorctă.

UTILIZARE ORALĂ (pentru vârsta de 4 ani și peste):

Gura trebuie să rămână închisă până la 5 minute înainte de a încerca o citire.

Așezați termometrul în gură sub limbă, astfel încât să se sprijine la stânga sau la dreapta rădăcinii

limbă.

Folosiți presiunea limbii în jos pentru a ține termometrul în poziție.

Țineți termometrul pentru a împiedica alunearea în gură.

AFIȘAREA ULTIMEI TEMPERATURII

Apăsând butonul pentru a afișa temperatura care a fost măsurată cel mai recent.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea "MĂSURAREA TEMPERATURII".

MĂSURARE CORECTĂ

Precizia măsurătorii nu poate fi asigurată atunci când metoda utilizată pentru măsurarea temperaturii este

incorctă.

UTILIZARE ORALĂ (pentru vârsta de 4 ani și peste):

Gura trebuie să rămână închisă până la 5 minute înainte de a încerca o citire.

Așezați termometrul în gură sub limbă, astfel încât să se sprijine la stânga sau la dreapta rădăcinii

limbă.

Folosiți presiunea limbii în jos pentru a ține termometrul în poziție.

Țineți termometrul pentru a împiedica alunearea în gură.

AFIȘAREA ULTIMEI TEMPERATURII

Apăsând butonul pentru a afișa temperatura care a fost măsurată cel mai recent.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea "MĂSURAREA TEMPERATURII".

MĂSURARE CORECTĂ

Precizia măsurătorii nu poate fi asigurată atunci când metoda utilizată pentru măsurarea temperaturii este

incorctă.

UTILIZARE ORALĂ (pentru vârsta de 4 ani și peste):

Gura trebuie să rămână închisă până la 5 minute înainte de a încerca o citire.

Așezați termometrul în gură sub limbă, astfel încât să se sprijine la stânga sau la dreapta rădăcinii

limbă.

Folosiți presiunea limbii în jos pentru a ține termometrul în poziție.

Țineți termometrul pentru a împiedica alunearea în gură.

AFIȘAREA ULTIMEI TEMPERATURII

Apăsând butonul pentru a afișa temperatura care a fost măsurată cel mai recent.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea "MĂSURAREA TEMPERATURII".

MĂSURARE CORECTĂ

Precizia măsurătorii nu poate fi asigurată atunci când metoda utilizată pentru măsurarea temperaturii este

incorctă.

UTILIZARE ORALĂ (pentru vârsta de 4 ani și peste):

Gura trebuie să rămână închisă până la 5 minute înainte de a încerca o citire.

Așezați termometrul în gură sub limbă, astfel încât să se sprijine la stânga sau la dreapta rădăcinii

limbă.

Folosiți presiunea limbii în jos pentru a ține termometrul în poziție.

Țineți termometrul pentru a împiedica alunearea în gură.

AFIȘAREA ULTIMEI TEMPERATURII

Apăsând butonul pentru a afișa temperatura care a fost măsurată cel mai recent.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea "MĂSURAREA TEMPERATURII".

MĂSURARE CORECTĂ

Precizia măsurătorii nu poate fi asigurată atunci când metoda utilizată pentru măsurarea temperaturii este

incorctă.

UTILIZARE ORALĂ (pentru vârsta de 4 ani și peste):

Gura trebuie să rămână închisă până la 5 minute înainte de a încerca o citire.

Așezați termometrul în gură sub limbă, astfel încât să se sprijine la stânga sau la dreapta rădăcinii

limbă.

Folosiți presiunea limbii în jos pentru a ține termometrul în poziție.

Țineți termometrul pentru a împiedica alunearea în gură.

AFIȘAREA ULTIMEI TEMPERATURII

Apăsând butonul pentru a afișa temperatura care a fost măsurată cel mai recent.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea "MĂSURAREA TEMPERATURII".

MĂSURARE CORECTĂ

Precizia măsurătorii nu poate fi asigurată atunci când metoda utilizată pentru măsurarea temperaturii este

incorctă.

UTILIZARE ORALĂ (pentru vârsta de 4 ani și peste):

Gura trebuie să rămână închisă până la 5 minute înainte de a încerca o citire.

Așezați termometrul în gură sub limbă, astfel încât să se sprijine la stânga sau la dreapta rădăcinii

limbă.

Folosiți presiunea limbii în jos pentru a ține termometrul în poziție.

Țineți termometrul pentru a împiedica alunearea în gură.

